



INSTRUÇÕES DE USO

NOME TÉCNICO: Instrumentos Cirúrgicos

NOME COMERCIAL: Kit Cânulas para Discopexia de ATM

Fabricante:

ENGIMPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP:13501-600

CNPJ: 67.710.244/0001-39 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: <http://www.engimplan.com.br>

Telefone: (19) 3522 7407

Responsável Técnico:

Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5062668661

REGISTRO ANVISA Nº 10208610097

PRODUTO ESTÉRIL – ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

PRODUTO DE USO ÚNICO – NÃO REUTILIZAR

PROIBIDO REPROCESSAR

LEGENDA DOS SÍMBOLOS DA EMBALAGEM

	Código do produto		Evitar exposição direta à luz solar
	Número de lote		Manter protegido de umidade
	Consulte as instruções de uso		Cuidado - Frágil
	Temperatura limite		Não utilizar se a embalagem estiver violada
	Data de fabricação		Data de validade
	Esterilizado usando óxido de etileno		Não reutilizar
	Nome do fabricante		Não reesterilizar

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Instrumentos Cirúrgicos

Nome Comercial: Kit Cânulas para Discopexia de ATM

Composto por: Guias, Agulhas e Punção

Matéria Prima: PET, Aço Inox 304, Poliacetal e Silicone

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO)

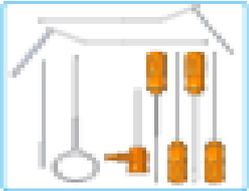
1. Descrição do Produto Médico

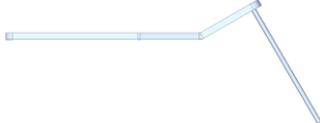
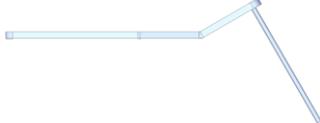
O Kit Cânulas para Discopexia de ATM é fornecido na condição estéril, unitariamente, em embalagem primária composta de bandeja tipo blister em PET e cobertura em papel de selagem; embalagem secundária de papelão e embalagem terciária de filme de proteção em PE.

1.1. Apresentação Comercial

O Kit Cânulas para Discopexia de ATM é composto dos seguintes itens:

Tabela: Apresentação do Kit Cânulas para Discopexia de ATM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
104.20752	KIT CÂNULA PARA FIXAÇÃO DO DISCO MANDIBULAR	
COMPONENTES		
204.107520	GUIA PARA AGULHA	
204.107525	AGULHA PONTA GANCHO	
204.107528	AGULHA PONTA ROMBA	
204.107530	AGULHA CURETA LONGA	
204.107532	AGULHA PONTA PERFURANTE	
204.107534	GUIA COM OLHAL	

204.107537	PUNÇÃO AGULHA PERFURANTE	
204.107540	PUNÇÃO AGULHA RETA	
204.107541	GUIA Ø 2,7	
204.107544	GUIA Ø 1,5	

"As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Este documento não se trata de material publicitário."

2. Composição

O Kit Cânulas para Discopexia de ATM tem como matéria-prima o PET, Aço Inox 304, Poliacetal e Silicone.

3. Indicações e Finalidade

O Kit Cânulas para Discopexia de ATM é indicado para auxiliar na perfuração, insuflação, visualização, remoção total ou parcial de articulações, ossos e tecidos moles em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos de ATM.

3.1. Contraindicação

Não se aplica

4. Forma de Apresentação da embalagem

O Kit Cânulas para Discopexia de ATM é fornecido **UNITARIAMENTE**, na condição estéril, em embalagem primária composta de bandeja tipo blister e embalagem secundária de papelão. As embalagens são identificadas com uma etiqueta contendo as seguintes informações:

1. Nome Técnico;
2. Nome Comercial;
3. Produto/Dimensões;
4. Código;
5. Quantidade;
6. Fabricação;

7. Lote;
8. Material;
9. Validade;
10. Registro ANVISA: xxxxxxx;
11. Responsável Técnico;
12. Dados do Fabricante;
13. Código de barra.

FABRICANTE: ENGIPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.
Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP:13501-600
CNPJ: 67.710.244/0001-39 – INDÚSTRIA BRASILEIRA
Site: <http://www.engimplan.com.br>
Telefone: (19) 3522 7407

E os dizeres:

**PRODUTO ESTÉRIL – ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO)
PRODUTO DE USO ÚNICO – NÃO REUTILIZAR
PROIBIDO REPROCESSAR**

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO,
MANIPULAÇÃO, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS,
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO “VER INSTRUÇÕES DE USO”.

Armazenar em local fresco e seco, fora da ação direto de calor, umidade ou luz excessiva.

Instrução de Uso disponível em: <http://www.engimplan.com.br/instrucaodeuso>

**Para Instruções de Uso no formato impresso o consumidor pode solicitar sem custo adicional,
inclusive de envio, através do SAC 0800770-7475**

“Para acesso a versão correta das instruções de Uso, seguir orientação do impresso
ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO que consta dentro da embalagem”

4.2 Esterilização

O Kit Cânulas para Discopexia de ATM é fornecido na condição estéril, através da esterilização por Óxido de Etileno (ETO).

4.3 Descarte

Quando da necessidade de se descartar o instrumental, o mesmo deve ser descaracterizado imediatamente de forma a evitar que seja utilizado inadvertidamente.

O descarte do Kit Cânulas para Discopexia de ATM deverá obedecer às normas relativas à eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

Deve a Instituição hospitalar, descaracterizar o produto, conforme legislação vigente aplicada.

4.4 Eventos Adversos

Caso ocorra algum evento adverso relacionado ao produto, deverá ser notificado o fabricante através do telefone (19) 3522 7407 e notificar o órgão sanitário competente, acessando o site da ANVISA – www.anvisa.gov.br/notivisa.

5 Precauções e Advertências

- Remover o produto de sua embalagem somente no momento da utilização e manusear apenas em campos estéreis para assegurar a esterilidade do material;
- Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O uso indevido dos materiais, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins excluídos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e causar danos ao implante;
- A combinação dos produtos da Engimplan com os de outros fabricantes pode apresentar diferenciação em material ou qualidade. A utilização de instrumentos distintos pode acarretar riscos de complicações técnicas;
- Somente profissionais especializados e treinados em técnicas cirúrgicas de implantes de ATM poderão utilizar estes instrumentais;
- Verificar antes do uso se os instrumentais não sofreram algum dano. Caso estejam danificados, o produto ou a embalagem, todo material deve ser deformado, identificado como impróprio para uso e descartado conforme legislação vigente;
- Utilizar sempre os instrumentais apropriados para cada tipo de implante e nunca tentar substituir algum elemento por outro que não é apropriado ao uso pretendido;
- Não deve ser armazenado em local onde também são armazenados produtos químicos que podem exalar vapores corrosivos;

- O Kit Cânulas para Discopexia de ATM é um produto de uso único e de reprocessamento proibido e não pode ser reutilizado.

5.1 Rastreabilidade

A rastreabilidade do Kit Cânulas para Discopexia de ATM é garantida através de marcação a laser do logo do fabricante (Engimplan), número do código e do número de lote no produto.

5.2 ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso no site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso

Modelo de alerta de instrução de uso (Imagem Ilustrativa)

engimplan

ALERTA - INSTRUÇÕES DE USO

Conforme Instrução Normativa da ANVISA de nº 04, de 19 de junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de Instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das **Instruções de Uso** no site do fabricante do produto.

As **Instruções de Uso** apresentam informações técnicas, claras e detalhadas sobre as características do produto, precauções e advertências, contraindicações, instruções para o uso e os tamanhos/modelos disponíveis para comercialização.

As **Instruções de Uso** para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.engimplan.com.br

Para a visualização dos arquivos utilize o software Adobe Reader.

As **Instruções de Uso** estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA e respectivo NOME COMERCIAL, DATA e a REVISÃO da Instrução, Informados no rótulo do produto adquirido.

Todas as **Instruções de Uso** possuem a identificação e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta versão (revisão) da **Instrução de Uso** informada no rótulo do produto.

Para **Instruções de Uso** no formato impresso, o consumidor pode solicitar sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do SAC 0800770-7475.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
SAC: 0800770-7475
E-mail: engimplan@engimplan.com.br
Rodovia Washington Luís, Km 172, Pista Sul, S/N,
Condomínio Compark, Rua 6 – Jardim Anhanguera – CEP:
13501-600 – Rio Claro-SP.
Horário de Atendimento: 07h30 às 18h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Instruções de Uso disponíveis em:
www.engimplan.com.br

Versão: 0000
Emissão: XXXXX/XXXX

5.3 Reclamação

Caso o produto apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Engimplan. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP:13501-600.

A Engimplan disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (19) 3522 7407 para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Engimplan Engenharia de Implante Indústria e Comércio Ltda.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP:13501-600
Telefone: (19) 3522 7407

Responsável Técnico: Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5062668661

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Bruno de Castro Ferreira Barreto
Representante Legal

Eng.^a Rosana Maria Moreira Santos
Responsável Técnico
CREA-SP 5062668661